

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione:	230v+/-10% 50/60Hz
Frequenza di rete:	50/60Hz
Potenza assorbita:	Elettroporazione: max 50W Radiofrequenza: max 130 VA
Potenza d'uscita:	Radiofrequenza max 50W
Caratteristiche d'uscita:	Elettroporazione Out = 1,5ma/cm ² a 2,5 KHz carico 500 Ohm V max = 130 va 2,5 KHz
Radiofrequenza	Frequenza 0,457 KHz



Salerno - Italy
Sede commerciale Milano - Italy
info@labeaute.it

www.labeaute.it

laBeaute 

WARM Club **PORATION**
RADIOFREQUENCY



**RADIOFREQUENZA
MONOPOLARE CAPACITIVA
ED ELETTROVEICOLAZIONE
TRANSDERMICA**



IL TUO ALLEATO NELLA LOTTA ALL'INVECCHIAMENTO CUTANEO! TRATTAMENTO URTO CONTRO GLI INESTETISMI DEL VISO E DEL CORPO



Warmclub Radiofrequency Poration consente di trattare un'ampia varietà di inestetismi grazie alla combinazione di due tecnologie: **Elettroporazione** e **Radiofrequenza monopolare capacitiva**

ELETTROPORAZIONE: è una tecnica di veicolazione transdermica che mediante impulsi elettrici modulabili provoca l'apertura dei canali acquosi (elettropori) naturalmente presenti nella pelle. Sfruttando questi canali di passaggio si ha una maggiore veicolazione dei principi attivi dei cosmetici utilizzati. L'elettroporazione ha tempi di applicazione più brevi rispetto alla tradizionale ionoforesi, è assolutamente indolore, non invasiva e consente la veicolazione controllata e profonda sia di micro che macromolecole
Manipolo viso e corpo


RADIOFREQUENZA MONOPOLARE CAPACITIVA: combinazione che riassume tutti gli effetti migliori della RF, poiché sviluppa un calore endogeno in profondità che accelera la riproduzione dei fibroblasti (stimolando così la produzione di nuovo collagene ed elastina) e favorisce il rifasamento delle fibre di collagene già esistenti, per uno straordinario effetto liftante e rimpolpante. Non richiede l'utilizzo di un gel conduttore.
7 elettrodi intercambiabili di diverse dimensioni per trattare il viso e le diverse zone del corpo




TRATTAMENTO FOCALIZZATO con selezione della zona da trattare:

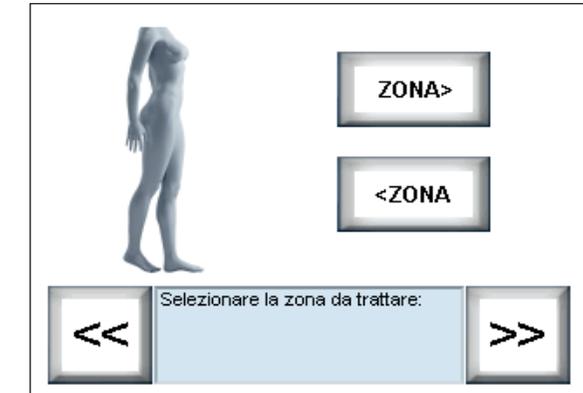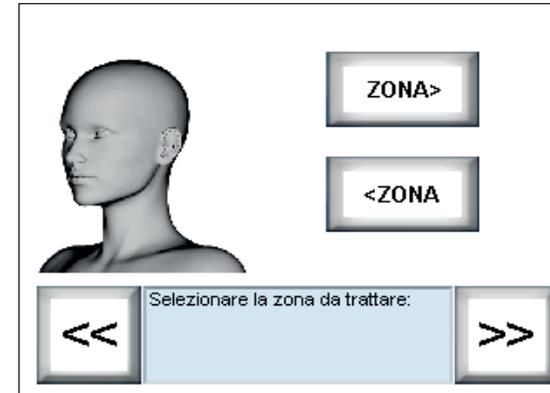

Selezione dell'elettrodo da utilizzare

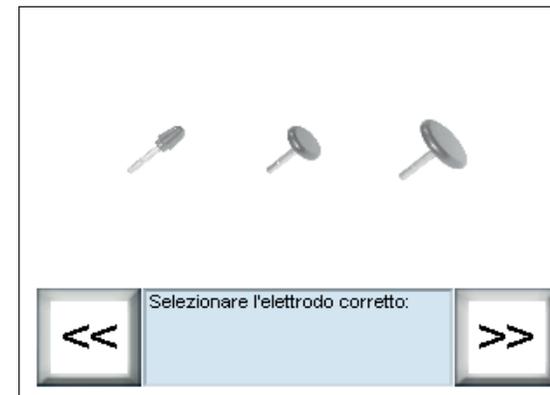

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA sull'area trattata

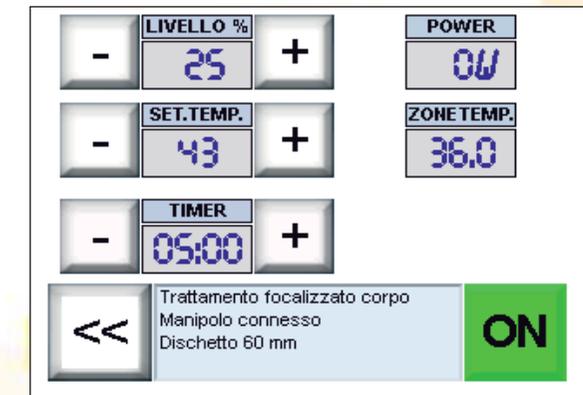

Grazie ad un controllo totale del trattamento potrai ottimizzare i tempi di lavoro ed ottenere risultati superiori!

EFFICACE PER:

- Riduzione della profondità delle rughe
- Trattamento delle ipotonie cutanee con conseguente aumento del turgore
- Aumento dell'ossigenazione dei tessuti
- Trattamento di cellulite fibrosa
- Miglioramento delle smagliature

RADIOFREQUENZA

7 elettrodi intercambiabili di diverse dimensioni per trattare il viso e le diverse zone del corpo

ELETTROPORAZIONE

Manipolo viso e corpo

